



CONTENIDO

AVISO.....	2
BIENVENIDO A SOTA.....	2
ANTES DE USAR.....	2
PARA APRENDER MÁS.....	3
APARATO COMPLETO INCLUYE.....	3
NO USAR.....	3
PRECAUCIONES.....	3
RESUMEN DE LAS LUCES.....	4
CÓMO USAR EL MAGNETIC PULSER.....	5
Cómo debe sentir.....	6
Uso típico.....	6
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS.....	7
Requisitos de potencia.....	7
Potencia de entrada opcional.....	7
Modo regular - especificaciones de producción.....	7
Modo rápido -especificaciones de producción.....	7
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	8
LOS PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LA FABRICACIÓN.....	8
ACCESORIOS ADICIONALES.....	8
GARANTÍA.....	8
REPARACIONES.....	8

AVISO

SOTA Instruments Inc. solo puede verificar la exactitud de la información proporcionada en inglés. El uso de este manual traducido indica que usted entiende y acepta que SOTA Instruments Inc. no acepta responsabilidad por cualquier inexactitud, pérdida, daño u otros problemas directos o indirectos derivados del uso de este manual. Si hay alguna duda sobre la exactitud de la información traducida, favor de consultar el manual oficial en idioma inglés, disponible para su descarga en www.sota.com.

BIENVENIDO A SOTA

Gracias por permitirnos ser parte de su equipo de salud.

El Magnetic Pulser es un producto de consumo destinado a ser utilizado como parte de un estilo de vida sano. Comprometerse con un estilo de vida saludable es un factor importante en el camino hacia el bienestar.

El Magnetic Pulser de SOTA ofrece los beneficios de un campo magnético pulsado que ayuda a equilibrar la electricidad natural del cuerpo.

El Magnetic Pulser está diseñado para ser utilizado independientemente, y también se puede usar junto con cualquier de los productos SOTA.

Con el cuidado adecuado, el Magnetic Pulser de SOTA debería durar muchos años sin problemas.

Favor de tener en cuenta que los resultados variarán.

ANTES DE USAR

Favor de leer atentamente el manual antes de usar el Magnetic Pulser. Para el manual más reciente, le invitamos a visitar el sitio web SOTA www.sota.com/manuals.

Nos aseguramos de que la información en su manual esté actualizada al momento de la impresión; sin embargo, desde la impresión, tenga en cuenta que puede haber nueva información disponible.

PARA APRENDER MÁS

Los invitamos a visitar el sitio web de SOTA:
www.sota.com

El sitio web le ofrece videos instructivos, preguntas más frecuentes, *La Guía de productos SOTA*, noticias SOTA ... y más.



APARATO COMPLETO INCLUYE

- Un (1) aparato Magnetic Pulser
- Un (1) cable adaptador
- Un (1) estuche
- Un (1) manual de instrucción

NO USAR

1. No usar si tiene marcapaso. Sólo con la autorización de su médico que podría ser posible utilizar de forma segura en las zonas más baja que la cintura.
2. No usar en los siguientes casos como la seguridad no se ha sido explorada:
 - a. Si está embarazada
 - b. En el área de un dispositivo implantado, como un marcapasos, una derivación etc.
 - c. Sobre o en el área de las heridas sangrantes, ya sean externas o internas, incluyendo la menstruación, porque los campos magnéticos pulsantes pueden aumentar el flujo de sangre.
 - d. En el área de un implante de metal. Algunos metales podrían absorber el calor generado por el campo magnético y podrían causar incomodidad o una quemadura. Los empastes dentales metálicos también son raramente afectados.
3. En cuanto a todos los productos eléctricos, no usar cerca del agua, al volante de un vehículo o al operar maquinaria pesada.

PRECAUCIONES

1. Es posible que el uso de un campo magnético pulsado pueda enmascarar el dolor. Es aconsejable consultar a un profesional de la salud para determinar la causa del dolor.
2. En casos muy raros, algunas personas con dolor del nervio relacionado con la neuropatía, han reportado un incremento en dolor al utilizar el aparato. Si

- experimenta dolor del nervio o un aumento en el dolor del nervio durante el uso del aparato, favor de dejar de usarla en el área del dolor.
3. Si usa las pomadas o los lociones o los medicamentos que crean calor o los que crean sensibilidad al calor, se puede producir quemaduras en la piel.
 4. A pesar de que la ciencia no es concluyente, el polaridad sur (+) puede estimular. Por esta razón, se sugiere precaución al aplicar el lado de polaridad sur del emisor (+) a cualquier condición en la que la estimulación puede ser nociva o indeseable. El lado sur (+) del emisor es el lado con el logotipo SOTA.
 5. Cuando esté en uso, asegúrese de que hay un buen flujo de aire alrededor de la cabeza del emisor. Con el uso normal, el emisor se calentará desde poco hasta mucho. Si se siente incómodo, apagar el aparato y para evitar una quemadura de piel - dejar que se enfríe antes de volver a usar.
 6. Para evitar daños o pérdidas de información, mantener el aparato lejos de los remedios homeopáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de seguridad, cintas de audio y de video. También lejos de equipos electrónicos - los discos de computadora, audífonos, teléfonos celulares, contestadores automáticos, y otros.
 7. Aunque la tecnología es en general considerado seguro, existe el potencial de raras reacciones individuales que no pueden preverse razonablemente. Por lo tanto, su uso de los productos SOTA constituye la aceptación de que usted es responsable de su decisión de usar esta tecnología.

RESUMEN DE LAS LUCES

VERDE: Indica que el aparato está encendido en modo normal y que el pulso está creciendo.

AMARILLA: Indica que el aparato está encendido en modo rápido y que el pulso está creciendo.

ROJA: Indica que el pulso está pasando. Indica que la opción del sonido está encendida.

NARANJA: Indica que la opción de sonido está puesta.

CÓMO USAR EL MAGNETIC PULSER

1. Insertar la conexión del cable adaptador de pared en el aparato, y conectar el enchufe del adaptador a la toma de corriente eléctrica de la pared.
2. Empujar el botón ON/OFF/MODE. Todas las luces parpadean en seguida para indicar que el aparato está listo. El aparato se inicia en modo normal.

La luz VERDE indica que el pulso está creciendo y que el aparato está configurado en modo normal.

Para cambiar al modo rápido, empujar el botón ON/OFF/MODE. Las luces AMARILLAS indican que el pulso está creciendo.

En ambos modos, la luz ROJA parpadea cada vez que se libera el pulso del emisor. A veces un sonido clic se escucha cuando se libera el pulso. Ver más abajo para más información sobre los modos.



3. Opción de sonido: Empujar el botón SOUND para oír un bip cada vez que se libera el pulso magnético. La luz NARANJA indicará que la opción de sonido está en marcha.




4. La cabeza del emisor debe de estar puesta al cuerpo tan cerca que posible. No es necesario que el emisor toque la piel ya que la ropa no es ningún impedimento al campo magnético.

5. Para la mayoría de las aplicaciones,

usar el lado del emisor marcado con N (-) Bio North contra el cuerpo. También está marcado con una N en braille.

6. Al terminar una sesión (aprox 20-30 minutos) el aparato emitirá un sonido. Para seguir con otra sesión, empujar el botón ON/OFF/MODE en los próximos 20 segundos. Si el botón no está empujado, se apaga el aparato automáticamente.

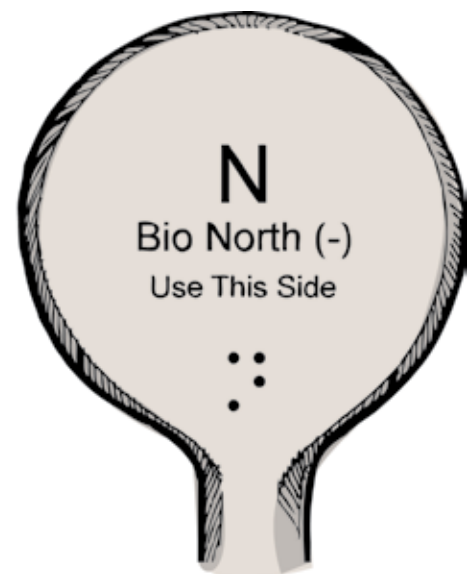

7. Para apagar el aparato antes del final del ciclo cronometrado, dejar empujado el botón por **dos** segundos enteros.
8. *Desconectar el enchufe adaptador de pared* cuando no está en marcha.

La diferencia entre los modos:

Modo regular: Para usar cuando se requiere una penetración más profunda. El pulso se emite cada 5-7 segundos. El campo magnético penetra al menos 23 cm (9 plg).

Modo rápido: Para usar cuando se requiere una penetración menos profunda. El pulso se emite cada segundo. El campo magnético penetra al menos 18 cm (7 plg).

CÓMO DEBE SENTIR

Muchas personas no sienten ninguna sensación al usar el Magnetic Pulser.

Con el uso normal, el emisor se calentará. Si llega a ser incómodo, apagar el aparato y dejar que se enfríe antes de continuar.


Otra opción es poner una capa protectora entre usted y el emisor; por ejemplo, una sola capa de una toalla de baño o de una manta delgada - siempre asegurándose de que haya un flujo de aire alrededor de la cabeza del emisor.

Una opción más rápida es poner un paquete de hielo o dos en la cabeza del emisor. Al aplicar, (incluso se puede aplicar dos paquetes, uno para cada lado), la temperatura del emisor bajará a un nivel normal. Es rápido y eficiente.

USO TÍPICO

Duración de la sesión: Es mejor empezar lentamente (10 minutos) y luego aumentar gradualmente la duración de cada sesión. Uso diario puede variar desde 20-30 minutos hasta dos horas o más.

Duración del uso: Cuando se usa durante muchas semanas como parte de un protocolo, para ver los resultados, es más importante utilizarlo diario durante varias semanas en lugar de usarlo sólo esporádicamente. Para una intención específica, puede ser más beneficioso usarlo durante un tiempo más largo y con más frecuencia. Generalmente, el Magnetic Pulser se puede usar como sea necesario.

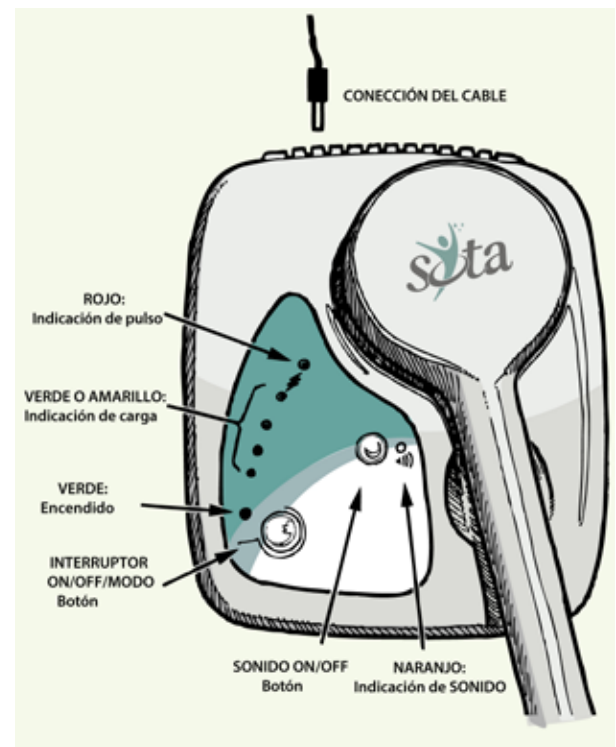

Posición: Se puede sostener el emisor contra el cuerpo durante uno o más ciclos cronometrados. Se puede moverlo en cualquier momento, a una posición diferente contra el cuerpo.

Tomar mucha agua: Es importante tomar suficiente agua durante el uso del aparato. Tomar agua ozonizada es especialmente útil.

Detener progresivamente: Reducir la cantidad de tiempo cada día durante la última semana de uso. Si usa más que un aparato SOTA al mismo tiempo, le sugerimos dejar de usar sólo un aparato a la vez.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Su Magnetic Pulser emite *un campo magnético pulsado temporal y corriente continua*.

REQUISITOS DE POTENCIA

12 voltios de corriente continua @1.5 amperes con una **punta positiva**.

Precaución: Exceder las indicaciones de tensión o utilizar una conexión inversa puede provocar lesiones o una falla de la unidad. Eso **anulará** la garantía.

POTENCIA DE ENTRADA OPCIONAL

Para operar el Magnetic Pulser desde una fuente corriente continua de 12 voltios, como una batería de automóvil o un panel solar adecuado, obtener un cable de alimentación universal con **punta positiva**.

MODO REGULAR – ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN

Intensidad del campo magnético: Superior a 6000 gauss a la cara del emisor como probado con un metro Tesla de F.W. Bell 5080.

Duración del pulso: ~2.5 mS (milisegundos).

Pulsos por ciclo cronometrado: 255 pulsos (aprox 20-30 minutos)

MODO RÁPIDO – ESPECIFICACIONES DE PRODUCCIÓN

Intensidad del campo magnético: Superior a 2500 gauss a la cara del emisor como probado con un metro Tesla de F.W. Bell 5080.

Duración del pulso: ~2.5 mS (milisegundos).

Pulsos por ciclo cronometrado: 1400 pulsos (aprox 20-30 minutos)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Una guía de cómo resolver problemas para el pulsador magnético está disponible en www.sota.com/manuals. Esta guía es un gran recurso si hay cualquier problema con su aparato.

LOS PAÍSES QUE PARTICIPAN EN LA FABRICACIÓN

La fabricación de los productos SOTA es una colaboración global. Los siguientes países han participado en la elaboración del Magnetic Pulser (en orden alfabético): **Camboya, Canadá, China, Corea del Sur, EE.UU, Hong Kong, Malasia y Tailandia.**

ACCESORIOS ADICIONALES

Para reemplazar sus accesorios, favor de ponerse en contacto con su proveedor.

GARANTÍA

El Magnetic Pulser modelo MP6 está cubierto por un período de dos (2) años de garantía limitada. Favor de guardar su prueba de compra. La garantía será nula si el fallo se debe al abuso o a la negligencia. SOTA se reserva el derecho a realizar cambios al Magnetic Pulser sin compromiso.

REPARACIONES

Favor de ponerse en contacto con su proveedor para las instrucciones de devolución. O, para obtener información sobre su más cercano centro de reparaciones, comunicarse con repairs@sota.com o Tel s/c: 1.800.224.0242 (de los EE.UU. o de Canadá)
Tel: 1.250.770.2023



Hecho en China y elaborado en Canadá.

• Las unidades SOTA son productos de consumo diseñados para la relajación, el bienestar y para complementar un estilo de vida saludable • Las unidades SOTA no son dispositivos médicos ni son destinados para diagnosticar, tratar o curar cualquier condición médica o condición de salud • El uso, la seguridad y la eficacia de las unidades de SOTA, no han sido aprobados por ninguna agencia de gobierno • Favor de consultar a un profesional de la salud para cualquier condición médica o condición de salud • Los resultados utilizando los productos SOTA varían para cada persona • Tenga en cuenta que se considera que todas las compras de los productos SOTA sean hechas en Penticton, BC, Canadá •